

ベッド・
ベッド
付属品

スロープ

床ずれ
防止用具


スロープの走行における注意点

降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

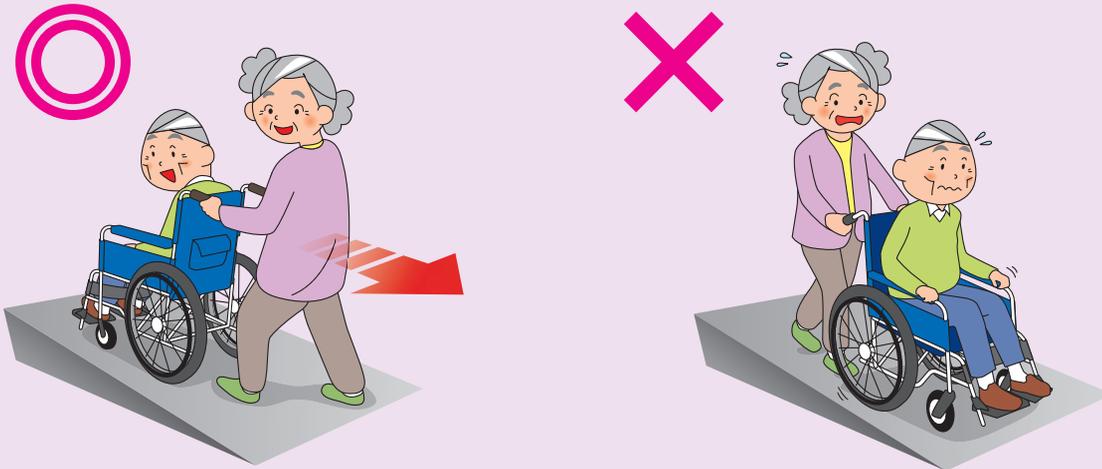


歩行
補助杖

スロープの選び方

※適用傾斜角度は車椅子の種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使いください。

段差の高さ	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	50cm	60cm	70cm
歩行者	65cm	70cm										
車椅子・ 車椅子 付属品	85cm	87.5cm										
スロープ	100cm	120cm	125cm	135cm	150cm	165cm	175cm	200cm	205cm	240cm	245cm	255cm
移動用 リフト・ つり具	285cm											
介護保険 購入 対象品												
販売品												

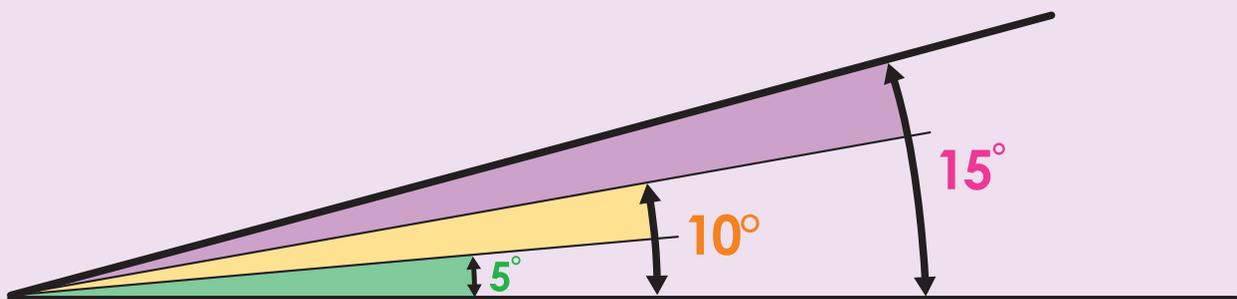

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/スロープ 介護給付:171008 予防給付:671008

ベッド・
ベッド
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品


販売品

情報

ケアスロープ

ケアメディックス

材質:FRP+アルミ

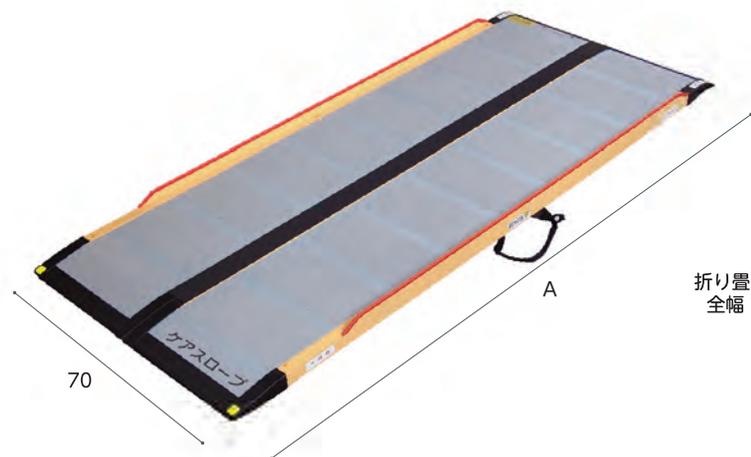折り畳み時
全幅 35

商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CS-65	65	約3	28-0979-1	00093-000015	418 円	836円	1,254円	4,180円
CS-100	100	約5	28-0980-1	00093-000016	484 円	968円	1,452円	4,840円
CS-120	120	約6	28-0981-1	00093-000017	524 円	1,048円	1,572円	5,240円
CS-150	150	約8	28-0982-1	00093-000018	628 円	1,256円	1,884円	6,280円
CS-175	175	約9	28-0983-1	00093-000019	628 円	1,256円	1,884円	6,280円
CS-200	200	約10	28-0984-1	00093-000020	734 円	1,468円	2,202円	7,340円
CS-240C	240	約12	28-1015-1	00093-000021	890 円	1,780円	2,670円	8,900円
CS-285C	285	約15	28-1092-1	00093-000038	1,080 円	2,160円	3,240円	10,800円

STEP 1



- ・ 介助者の状況を確認し、選定してください。
- ・ 段差の高さを確認し、スロープの長さだけでなく角度も含めて選定してください。

老老介護の場合 推奨角度8°
スロープの長さ
||
段差の高さ × 8倍以上

ケアスロープ選定理由例

《CS-175》
玄関に約20cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能であり、転倒を防止し介助負担を軽減するために選定。

《CS-240C》
玄関に約30cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能で脱輪防止エッジがあり車椅子が安全に移動できるスロープとして選定。

STEP 2

- ・ 日本家屋に多い狭い間口・場所でも設置可能な、幅狭設計です。




- ・ 下部までエッジが無いので、狭い場所で車椅子が直角に乗り入れしやすい設計です。

- ・ アルミ製脱輪防止エッジにより衝撃に強く、丈夫で安全に走行することができます。

STEP 3

- ・ 収納しやすい自立設計です。
- ・ 様々な段差に応じて長さを選択できる豊富なラインナップを取り揃えております。

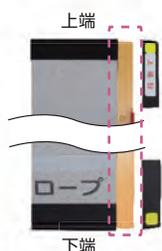

- ・ スロープの先端までアルミ加工を施すことにより、設置時にしっかりと固定できます。

STEP 4



- ・ 設置の際は必ず先端が4cm以上かかっていること、ガタツキがないこと、走行面に異物がないことを確認したうえでご使用ください。
- ・ 走行面にソフトなすべり止めを採用しているため、室内使用時にスロープの上を裸足でも歩いても痛くありません。

ベッド・
ベッド
付属品

ケアスロープJ

ケアメディックス

※全長、重さはジョイント台含む
 ※ケアスロープJ用ジョイント台 幅78×長さ42.5×高さ21~26cm
 ※スロープ2台とジョイント台をセットにしたときに介護保険適応となります

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

- スロープを2本つなぎ合わせることで高段差に対応。
- 3つのパーツに分割ができるので運搬、収納が容易です。
- 可搬型スロープでは無い最長約5mの長尺スロープになります。
- ジョイント台を使ってスロープをつなぎ合わせるタイプなので、軽ワゴンでも運搬可能です。
- アルミ製脱輪防止エッジ(高さ2.5cm)の採用により、衝撃に強く、丈夫で安心です。



下端側ケアスロープ

+

ケアスロープJ用ジョイント台

+

上端側ケアスロープ

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

||

ケアスロープJ

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

商品名	スロープ全長	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CSJ-300	313	約28	28-1064-1	00093-000022	1,540円	3,080円	4,620円	15,400円
CSJ-325	338	約29	28-1065-1	00093-000023	1,594円	3,188円	4,782円	15,940円
CSJ-350W	363	約30	28-1100-1	00093-000044	-円	-円	-円	-円
CSJ-350	363	約30	28-1066-1	00093-000024	1,644円	3,288円	4,932円	16,440円
CSJ-375	388	約31	28-1101-1	00093-000045	-円	-円	-円	-円
CSJ-390	403	約32	28-1067-1	00093-000025	1,802円	3,604円	5,406円	18,020円
CSJ-400	413	約32	28-1103-1	00093-000048	-円	-円	-円	-円
CSJ-415	428	約33	28-1102-1	00093-000046	-円	-円	-円	-円
CSJ-440	453	約34	28-1104-1	00093-000049	-円	-円	-円	-円
CSJ-480	493	約36	28-1105-1	00093-000051	-円	-円	-円	-円

販売品

情報

税込価格で表記しています。(**非課税** ※非課税 と表記のない商品に限る) **単位:CM**

サービスコード/スロープ 介護給付:171008 予防給付:671008

ベッド・
ベッド
付属品

エコ段差スロープN

マツ六

レ販
対象置くだけで「つまずき」の原因の
段差を解消!

76

商品名	高さ (cm)	奥行き (cm)	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
10N	1	4	0.2	28-1030-1	01265-000120	50円	100円	150円	500円
14N	1.4	6	0.3	28-1016-1	01265-000095	50円	100円	150円	500円
20N	2	8	0.6	28-1017-1	01265-000096	50円	100円	150円	500円
25N	2.5	10	1	28-1018-1	01265-000097	50円	100円	150円	500円
30N	3	12	1.3	28-1019-1	01265-000098	50円	100円	150円	500円
35N	3.5	14	1.9	28-1026-1	01265-000116	50円	100円	150円	500円
40N	4	16	2.3	28-1027-1	01265-000117	50円	100円	150円	500円
45N	4.5	18	2.9	28-1028-1	01265-000118	50円	100円	150円	500円
50N	5	20	3.6	28-1029-1	01265-000119	50円	100円	150円	500円
55N	5.5	22	4.7	28-1031-1	01265-000121	50円	100円	150円	500円
60N	6	24	5.7	28-1032-1	01265-000122	50円	100円	150円	500円

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報


安心のご提案

対応段差 全11タイプで室内の段差に幅広く対応します!

滑りにくく、足にソフトな素材



端部は安心のラウンド加工

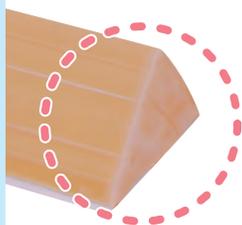
車椅子や歩行者が
側面からアプローチしても
ラウンド加工されているので
安心です。

安心のずれ防止仕様

置くだけでずれにくい
特殊仕様

勾配は全タイプ14°

断面図 ※敷居にピッタリと付けてください。

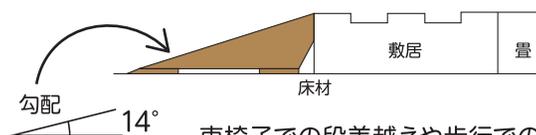車椅子での段差越えや歩行での
つまずき防止に安心です。